

alber®

Einfach mobil.



ADVENTURE



Eine Idee kann etwas in Gang setzen, was in dieser Form noch nicht da war und für das es deshalb nichts Vergleichbares gibt.

Ein Elektrorollstuhl mit Federung ist nichts Außergewöhnliches. Es ist vielmehr das perfekte Zusammenspiel aller Fahrwerkskomponenten, das den großen Unterschied zwischen dem Anspruch und der tatsächlichen Funktion macht. Der **ADVENTURE** bietet für Elektrorollstühle bislang ungekannte Fahrsicherheit, Antriebstraktion und Fahrkomfort.

Entdecken Sie die Möglichkeiten eines modularen Rollstuhlkonzeptes. Ob es der einfache Transport in Ihrem Auto ist oder der unvergleichlich schnelle Service – der **ADVENTURE** sichert und erweitert Ihre Mobilität um ein Vielfaches.

Der **ADVENTURE** wurde für den Innenbereich, die Straße und mehr konzipiert.



Eine Idee.





Unsere Spezialität: hocheffiziente Antriebsmotoren. Gegenüber herkömmlichen Rollstuhl-Elektromotoren steht bis zu 45 % mehr Reichweite bei gleicher Batteriekapazität zur Verfügung. Der gesamte Antrieb ist harmonisch in den Hinterrädern integriert. Das wartungsfreie Planetengetriebe sorgt für effizienten und kraftvollen Vortrieb.

Der Vorteil: Trotz kleiner und handlicher Akkus, lassen sich große Distanzen überwinden. Je nach Geländeprofil können Sie bis zu 45 km Freiheit genießen.

Durch den innovativen Motorenaufbau wird beim bergab Fahren Energie in die Akkus zurückgespeist – das erhöht die Reichweite.

Kraft und Ausdauer.



Der **ADVENTURE** wurde von Günther gefahren, dem ehemaligen Radamateur, der trotz seines Radunfalls kein bisschen von seiner Abenteuerlust verloren hat. Sein Zwillingbruder Jürgen begleitete ihn – wie in den Jahren zuvor – auf dem Fahrrad.



Neuland entdecken.

Wo eine Wille ist, ist für Rollstuhlfahrer nicht immer ein Weg. **ADVENTURE** fährt Dank seines einzigartigen Fahrwerkkonzeptes neue Wege. Für Standfestigkeit, Traktion und Komfort auf unebenem Gelände sorgen die vier unabhängig gefederten Räder. Die langen Federwege von 52 mm hinten wie vorne, sorgen für eine sehr effiziente Schwingungsdämpfung und somit maximalen Fahrkomfort auf unebener Fahrbahn.





Wer den ganzen Tag Elektrorollstuhl fährt, kennt es: Bodenunebenheiten wie Kopfsteinpflaster, Bordsteine und Schlaglöcher belasten den Fahrer. Sogenannte Ganzkörperschwingungen wirken sich nachweislich negativ auf unseren Organismus aus.

Um eine optimale Dämpfung und ein stabiles Fahrverhalten erreichen zu können, spielt die exakte Einstellung des Fahrwerkes auf das Gewicht des Fahrers eine entscheidende Rolle. Nur so ist eine wirksame und therapeutische Schwingungsdämpfung zu erreichen. Das **ADVENTURE**-Fahrwerk ermöglicht eine rundum stufenlose Abstimmung der Federung und erfüllt somit ganz besonders den individuellen Anspruch auf Komfort.



Ansprüche.



Im Zusammenspiel schaffen das große Vorderrad und die Federung Bordsteine bis **8 cm** Höhe. Auch das seitliche Hinabfahren von Bordsteinen wird durch die Einzelradfederung zum Kinderspiel. Optional ist ein Bordsteinheber erhältlich, mit dem Randsteine bis **12 cm** Höhe überwunden werden können.





Freiheit leben.

In leichtem Gelände und bei der Hindernisüberwindung spielt der Unterbau seine ganze Stärke aus: Die langen Federwege sorgen für Traktion und sicheren Stand auf Quergefälle. Abseits der Straße sorgt die sehr große Bodenfreiheit für mehr Bewegungsspielraum. Die neuartige Reifentechnik wurde speziell für den **ADVENTURE** entwickelt. In der Mitte wurde eine erhöhte Lauffläche eingearbeitet, die für Laufruhe und Drehfreudigkeit auf glattem Untergrund sorgt. Die erhöhte Profilierung an der Seite „beißt“ auch auf weichem Untergrund zu und bietet somit rundum gute Traktion für die sichere Fortbewegung.

Radentriegelung
für das einfache Abnehmen der
Antriebsräder zum Transport

Federung
52 mm Federweg für maximale
Sicherheit, Traktion und Komfort
an allen vier Rädern

Sitzaufnahme
mit Neigungsverstellung
für den Sitz



Kipstützen
mit Aufbockfunktion für
einfache Raddemontage

Schiebefunktion
Hebel für Schiebe- oder
Fahrtrieb

Parallelschwinge
für mehr Stabilität beim
Bremsen und bei der
Hindernisüberwindung

Mobilität beginnt mit Modularität.

Antriebsräder



Akku-Packs



Fahrwerk



Lenkräder





Bedienung – ganz einfach.

Das Bediengerät vereint Ergonomie und Funktion auf sinnvolle Weise. Auf Knopfdruck stehen für den Innen- und Außenbereich zwei unterschiedliche Fahrprogramme zur Verfügung: Fein abgestimmtes Fahrverhalten im Innenbereich – wesentlich agiler für mehr Fahrvergnügen im Außenbereich.

Die Fahreigenschaften lassen sich über die programmierbare Steuerung bedarfsgerecht an den Rollstuhlfahrer anpassen – Beschleunigung, Kurvengeschwindigkeit und Joystick-Empfindlichkeit sind nur drei von insgesamt zwölf Parametern, die frei programmierbar sind. Das große LCD-Display ist hintergrundbeleuchtet und liefert alle wichtigen Informationen zum Fahrzeugstatus anhand einer klar verständlichen Symbolik.

Powerbase



Sitzeinheit



Das Auto ist integrativer Bestandteil unserer selbständigen Lebensführung. Der **ADVENTURE** zeigt auch hier seine Stärken: Alle wichtigen Komponenten wie Räder, Sitz und Akku-Packs lassen sich im Handumdrehen und ohne Werkzeug vom Fahrwerk lösen. Dadurch wird ein geringes Packmaß erreicht, so dass **ADVENTURE** auch in einem Mittelklasse Auto transportiert werden kann.

Der Funktionssitz

erhältlich in zwei Sitzbreitenbereichen:

38 – 44 cm

44 – 52 cm



Serienumfang

- Bediengerät mit LCD-Display
- Vollgefedertes Fahrwerk
- Zwei Kippstützen
- Zwei Lenkräder mit Steckachse
- Zwei Radnaben-Antriebsräder, 6 km/h
- Beleuchtung (Front-Rückscheinwerfer, 2 Blinker nach StVZO)
- Funktionssitz mit Konturpolster
- Automatic-Batterieladegerät
- Zwei Akku-Packs für bis zu 45 km Reichweite

Zubehör (Auszug)

Die komplette Zubehörpalette finden Sie im Internet unter www.adventure-news.de



Rückspiegel



Handballenauflage



Kopfstütze



Externe Ladebuchse



Beckengurt



Schiebegriffe






Wadenstütze



Beckenpolster/Pelotten

Version	6 km/h	12 km/h	Bemerkungen
Bodenfreiheit	17 cm		
Wenderadius	88 cm (64 cm ohne Fußstütze)		
Steigfähigkeit bei 140 kg	18 %		
Akku-Packs	Blei-Gel, wartungsfrei, 24 Volt		zugelassen von IATA + DOT für den Transport in Flugzeugen
Automatik-Batterieladegerät	mit automatischer Abschaltung und Ladeerhaltung		Für Netzspannungen von 115 und 230 Volt
Reichweite (34 Ah)	bis zu 45 km	bis zu 45 km	Reichweite u.a. abhängig vom Geländeprofil und Insassengewicht
Maximale Zuladung	140 kg		
Gesamtgewicht (leer mit Funktionssitz)	96,7 kg		

Abmessungen

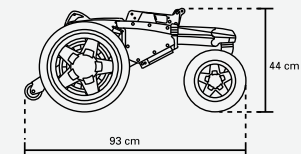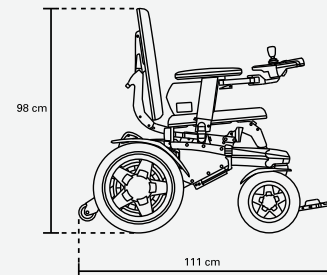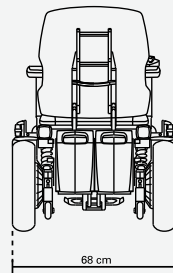

Spritzschutz



Bordsteinheber



Ladeadapter für Akkus



Schneeketten



Schwenkarm



Stockhalter



Gepäckträger



Recaro Specialist Sitze



25
25 Jahre
Ulrich Alber
GmbH

Ulrich Alber GmbH

Vor dem Weißen Stein 21
72461 Albstadt
Telefon 07432 2006-0
Telefax 07432 2006-299
info@alber.de
www.adventure-news.de

Häufig gestellte Fragen.

Ist der ADVENTURE gegen Regen bzw. Nässe geschützt?

Ja, alle Bauteile wurden für den Einsatz im Außenbereich konzipiert. Feuchte Wiesen oder leichter Regen sind kein Problem. Bei der Reinigung sollten alle elektrischen Kontakte abgedeckt sein und kein Hochdruckreiniger verwendet werden.

Welche Hindernishöhe schafft der ADVENTURE?

Bordsteine bis zu 8 cm können überwunden werden, mit dem optional erhältlichen Bordsteinheber sogar 12 cm.

Kann ich andere Sitzkissen verwenden?

Ja, hierzu muss nur das Originalpolster entfernt und ein neues Sitzkissen angebracht werden. Ihr Sanitätsfachhändler berät Sie gerne.

Wie lange dauert es, bis die Akkus komplett geladen sind?

Sind die Akkus völlig entleert, sind die Akkus in 8 Stunden wieder aufgeladen.

Wie lange ist die Garantiezeit?

Unsere Herstellergarantie beträgt 24 Monate auf alle Teile (außer auf Verschleißteile wie Reifen) und 12 Monate auf die Akku-Zellen.

Wo kann ich den ADVENTURE kaufen oder eine Probefahrt machen?

Wir verfügen über ein Netz von 20 Hilfsmittelberatern, die auf ganz Deutschland verteilt sind. Gerne führen wir Ihnen den **ADVENTURE** völlig kostenlos und unverbindlich bei Ihnen zu Hause vor. Zur Absprache eines Vorfahrtstermins wenden Sie sich bitte an unseren Vorfahrtsservice unter der zentralen Rufnummer 0800 9096999.

Die Versorgung findet über den Sanitätsfachhändler Ihres Vertrauens statt. Wir arbeiten flächendeckend mit 2.000 kompetenten Fachhandelspartnern zusammen, die Ihnen bei allen Fragen rund um die Hilfsmittelversorgung beratend zur Seite stehen.

Der **ADVENTURE** ist TÜV geprüft und entspricht den internationalen Richtlinien für Medizinprodukte. Er ist ein von den Krankenkassen anerkanntes Hilfsmittel. Im Hilfsmittelverzeichnis unter der Positionsnummer 18.50.04.0069 gelistet.



Der Alber 48-Stunden Mobilitätsservice.

Schön wenn man sich Sorgen sparen kann. Im Falle eines Funktionsausfalls ist Alber stets an Ihrer Seite. Unser einzigartiger 48-Stunden Mobilitätsservice sorgt dafür, dass Sie innerhalb kürzester Zeit wieder mobil sind – der modulare Aufbau unserer Produkte macht diese besondere Dienstleistung möglich.

Mit freundlicher Empfehlung:

50.0006.6.01.13
© Ulrich Alber, Albstadt

