

alber

Einfach mobil.

e-fix[®]

Elektrischer Zusatzantrieb



KLEIN. LEICHT. WENDIG.



Neue Mobilität genießen.

► Mit dem e-fix, dem elektrischen Zusatzantrieb für Ihren Rollstuhl, können Sie längere Strecken mühelos und zügig bewältigen. Die Umrüstung ist sehr einfach: lediglich die Antriebsräder austauschen sowie Akku-Pack und Bediengerät montieren – fertig. Die Motoren sind dezent in den Radnaben versteckt. Fast alle gängigen Rollstuhlmodelle lassen sich auf diese Weise mit dem e-fix ausrüsten. Das heißt: Sie können weiterhin Ihren optimal angepassten Rollstuhl verwenden ...

Mit dem großen Plus an deutlich mehr Mobilität. Selbst Rampen und Gefällstrecken bis zu 20 %* schafft der kraftvolle e-fix mühelos. Eine Akkuladung reicht für rund 30 km**.



HOTLINE
0800/9096999
(gebührenfrei)



e-fix: elektrischer Zusatzantrieb für Ihren Rollstuhl

* Abhängig von Rollstuhltyp, Personengewicht, Beschaffenheit des Untergrundes, Radstand, Schwerpunktlage des Rollstuhles.
** Großer Akku-Pack zur Kapazitätserweiterung optional erhältlich.




Einfach bedienerfreundlich.

► Das Steuern Ihres Rollstuhls mit e-fix ist kinderleicht, so dass Sie auf Antrieb damit zurechtkommen. Übersichtlich angeordnete, leicht erreichbare Tasten auf dem Bediengerät sorgen für einfachste Handhabung. Auf dem gut ablesbaren Display haben Sie alle wichtigen Informationen stets im Blick. Das beleuchtete Display lässt sich sogar bei Dunkelheit gut ablesen. Das kleine Bediengerät sorgt für großen Fahrkomfort. Die Geschwindigkeit lässt sich über einen griffgünstigen Regler stufenlos verstellen. Je langsamer die gewählte Geschwindigkeit ist, desto wendiger wird das Fahrverhalten. Sie lenken, e-fix denkt!

Ein schlaues Detail ist auch die Farbcodierung: Hinter allen farblich in Hellgrau abgesetzten Elementen steht eine Funktion (an/aus, schnell/langsam etc.). So erlangen Sie ganz leicht und ganz schnell wieder ein großes Stück mehr an Mobilität.

Die e-fix Komponenten:

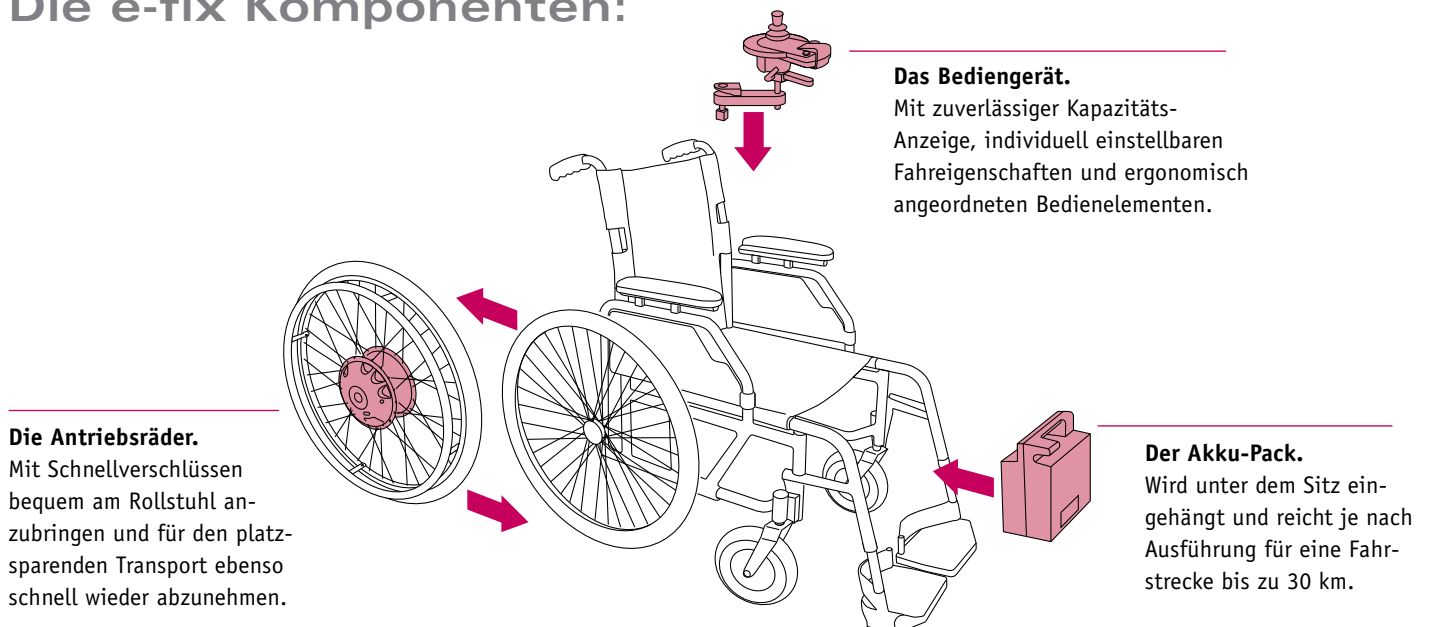



Mehr Freiheit im Alltag.

► Dank seiner enormen Wendigkeit ist der e-fix besonders im Innenbereich der ideale Begleiter. Drehen auf der Stelle und Rangieren auf engstem Raum sind seine Stärke. Nehmen Sie Platz, und entdecken Sie neue Freiräume in Ihren eigenen vier Wänden.

Der e-fix lässt sich auch ganz einfach von Hand anschieben, wenn es die Situation erfordert: Einfach die Antriebsräder mit einem Handgriff auskuppeln, und Ihr Rollstuhl lässt sich wie gewohnt manuell anschieben – entweder über die Greifreifen oder durch eine Begleitperson.



HOTLINE
0800/9096999
(gebührenfrei)



Antriebsräder einfach
aus- oder einkuppeln



Per Hand anschieben oder
elektrisch fahren: ganz wie
Sie wollen!

Sie bleiben flexibel – zwei Rollstühle in einem!



Handliche Technik für unterwegs.

► Ein großer Vorteil des e-fix ist sein geringes Gewicht. Das macht das Verladen kinderleicht. Einfach die Schnellverschlüsse lösen, und die e-fix Komponenten sind rasch und ohne Werkzeug vom Rollstuhl abgebaut. Kein Teil wiegt mehr als 9 kg.

So zerlegt findet der e-fix in jedem Kofferraum bequem Platz. Ebenso schnell ist er am Ziel wieder zusammgebaut.

So klein. So gut.





Maßarbeit wie Ihr Rollstuhl.

► Das e-fix Bediengerät lässt sich sowohl für Links- als auch für Rechtshänder am Rollstuhl befestigen. Entsprechend Ihren Wünschen können die e-fix Fahreigenschaften bedarfsgerecht programmiert werden.

Ein umfangreiches Zubehörprogramm steht zur Verfügung, um Erleichterung und mehr Komfort in Ihr Leben zu bringen. Mit den optional erhältlichen Antriebsrädern mit höherer Leistung können Sie Bordsteinen, Schwellen oder Steigungen leichter Paroli bieten. Oder wollen Sie größere Strecken bewältigen und somit Ihren Aktionsradius erweitern? Dann wählen Sie den leistungstärkeren Akku.



HOTLINE
0800/9096999
(gebührenfrei)



Schwenkarm: Feste Position im Fahrbetrieb, jedoch abschwenkbar, um näher an den Tisch heranzufahren.



Kippstützen mit Aufbockfunktion: Damit wird das Abnehmen der e-fix Räder noch leichter.



Kleiner und großer Akku-Pack: für eine Reichweite bis zu 30 km.



Intuitive Begleitsteuerung: Zum einfachen und sicheren Steuern des e-fix durch die Begleitperson.

Weiteres Zubehör:

Speichenschutz, verschiedene Joystickaufsätze, verlängerte Handauflage und vieles andere mehr! Alber oder Ihr örtlicher Sanitätsfachhändler beraten Sie gerne ausführlich zum umfangreichen Zubehörprogramm.



Auf den e-fix ist Verlass.

► Unabhängige Institutionen haben die Langlebigkeit, Qualität und Robustheit des e-fix – auch unter extremen Belastungen – getestet und positiv bewertet. Das formschöne, funktionale Design des e-fix wurde mit dem iF Design Award ausgezeichnet.

Hinter dem e-fix steht die jahrelange Erfahrung der Ulrich Alber GmbH, die als Spezialist für besonders portable und bedienerfreundliche Mobilitätshilfen vielen Menschen auf der ganzen Welt neue Bewegungsmöglichkeiten eröffnet hat.

Erfahren Sie mit dem e-fix eine ganz neue Lebensqualität. Sie sind herzlich eingeladen, den e-fix kostenlos und unverbindlich bei sich zu Hause auszuprobieren. Senden Sie dazu einfach den Vorführgutschein auf der Rückseite ausgefüllt an uns zurück.



product
design
award

2006



Ihre Fragen – unsere Antworten:

► Passt der e-fix an meinen Rollstuhl?

Der e-fix passt an die meisten Rollstuhlmodelle. Dazu werden am Rollstuhlrahmen Halterungen zur Aufnahme der Antriebsräder montiert. Ihre manuellen Rollstuhlräder können Sie in der Regel weiterverwenden.

► Wie schnell fährt der e-fix?

Die maximale Geschwindigkeit des e-fix können Sie stufenlos wählen zwischen 1,5 und 6 km/h. So finden Sie mit Sicherheit Ihr optimales Fahrtempo. Außerdem bieten Ihnen neun weitere Fahreinstellungen individuellen Fahrkomfort - je nach Ihren persönlichen Bedürfnissen und Lebensumständen.

► Welche e-fix Varianten gibt es?

Der e-fix ist für ein maximales Personengewicht von 120 kg ausgelegt. Die optional erhältlichen verstärkten und leistungstärkeren Antriebsräder ermöglichen sogar ein Personengewicht von bis zu 160 kg. In der Standardversion gibt es den e-fix in den Radgrößen 22 oder 24. Bei der Variante für ein Personengewicht von bis zu 160 kg sind die Radgrößen 12 und 24 erhältlich.

► Ist der e-fix nur als „Selbstfahrer“ gedacht?

Nein! Mit der als Zubehör erhältlichen Halterung lässt sich das Bediengerät an den Schiebegriffen des Rollstuhls montieren. So erleichtert der e-fix Begleitpersonen das Schieben. Die intuitive Begleitsteuerung (Zubehör) macht die Bedienung durch die Begleitperson zum Kinderspiel.

► Wie weit komme ich mit einer Akkuladung?

Abhängig von Personengewicht, Geländeform, Temperatur, Rollstuhleinstellungen und Untergrund reicht eine Akkuladung für bis zu 16 km. Mit dem optional erhältlichen größeren Akku-Pack erhöhen Sie die Reichweite auf bis zu 30 km.

► Wie steil darf eine Rampe oder Steigung sein, um sie mit dem e-fix noch befahren zu können?

Der e-fix schafft – abhängig von Rollstuhleinstellungen, Personengewicht und Untergrund – Steigungen bzw. Gefälle bis 20 %. Beachten Sie dabei jedoch unbedingt die Grenzwerte des Rollstuhlherstellers.

► Kann der e-fix auch im Auto mitgenommen werden?

Ja! Der modulare Aufbau macht's möglich. Alle e-fix Komponenten können einfach und ohne Werkzeug vom Rollstuhl abgenommen und platzsparend in jedem Pkw-Kofferraum verladen werden. Ihr Rollstuhl bleibt weiterhin faltbar.

► Wie viel wiegt der e-fix?

Antriebsräder	– je 7,8 kg
Akku-Pack	– 9,0 kg
Bediengerät	– 0,5 kg
Schnittstelle	– 1,4 kg
Gesamtgewicht	– 26,5 kg

► Welches Zubehör gibt es für den e-fix?

Kippstützen mit Aufbockfunktion, zum einfachen Abnehmen der Antriebsräder, Schwenkarm, um näher an Tische heranzufahren, unterschiedliche Begleitsteuerungen, um den e-fix auch wahlweise als Schiebehilfe zu verwenden, und vieles mehr ...

e-fix ist ein von den Kostenträgern anerkanntes Hilfsmittel und unter der Positionsnummer 18.99.05.1012 im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen gelistet.



Schön, wenn man sich keine Sorgen machen muss. Unser einzigartiger 48-Stunden Mobilitätsservice sorgt dafür, dass Sie bei einem Funktionsausfall innerhalb kürzester Zeit wieder mobil sind.



e-fix entspricht der EG-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte. Unser Qualitätsanspruch: Ihre Sicherheit! Zertifiziert nach aktuellsten Standards: ISO 9001:2000 und ISO 13485:2003 für Medizinprodukte.

Gewichtsangaben E25

max. Personengewicht: 120 kg

max. Gesamtgewicht: 170 kg
(inkl. efix, Rollstuhl, Rollstuhlfahrer)



Ulrich Alber GmbH

Vor dem Weißen Stein 21
72461 Albstadt
Telefon 07432 2006-0
Telefax 07432 2006-299
info@alber.de
www.alber.de

mit freundlicher Empfehlung:

www.alber.de